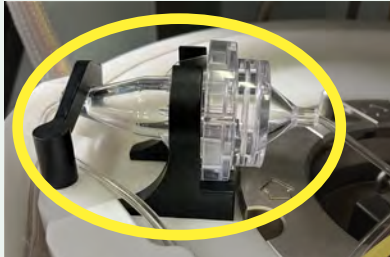
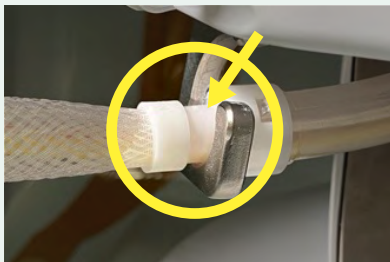
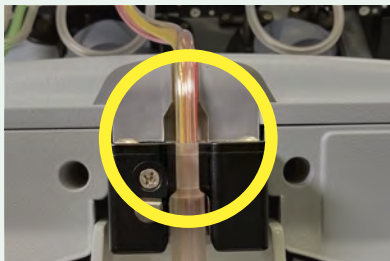


スペクトラ オプティア™ 遠心分離部の装着チェック 8つのポイント チェックリスト

実施日 /	担当者	スペクトラ オプティア用血液回路 ☐ IDLセット ☐ Collectionセット ☐ Exchangeセット ☐ PLTセット
① 採血ライン (ピンク色) の位置 採血ラインの根元がフィラーラッチ上の 2つのネジの間 にある  ☐ 確認済み		⑤ チャンバー ※Collectionセット/PLTセット使用時に確認 ブラケット内に装着され、クリップで固定されている  ☐ 確認済み 該当回路 ・ Collection セット ・ PLT セット
② ロックピン 下部カラーがロックされ、 ロックピンの 切り込み線 が見えている  ☐ 確認済み		⑥ 下部ベアリング 細い部分 がホルダーに差し込まれている  ☐ 確認済み
③ コネクタとチャネル フィラーの溝に確実に収まっている  ☐ 確認済み		⑦ 上部ベアリング 細い部分 がホルダーに差し込まれている  ☐ 確認済み
④ 採取ライン ※Collectionセット/PLTセット使用時に確認 オプティカルリファレンスの縁の 後ろ を通っている  ☐ 確認済み 該当回路 ・ Collection セット ・ PLT セット		⑧ 上部カラー カラーホルダーの最上部まで引き上げられている  ☐ 確認済み